


Parkoppla hörapparater direkt till en smartmobil

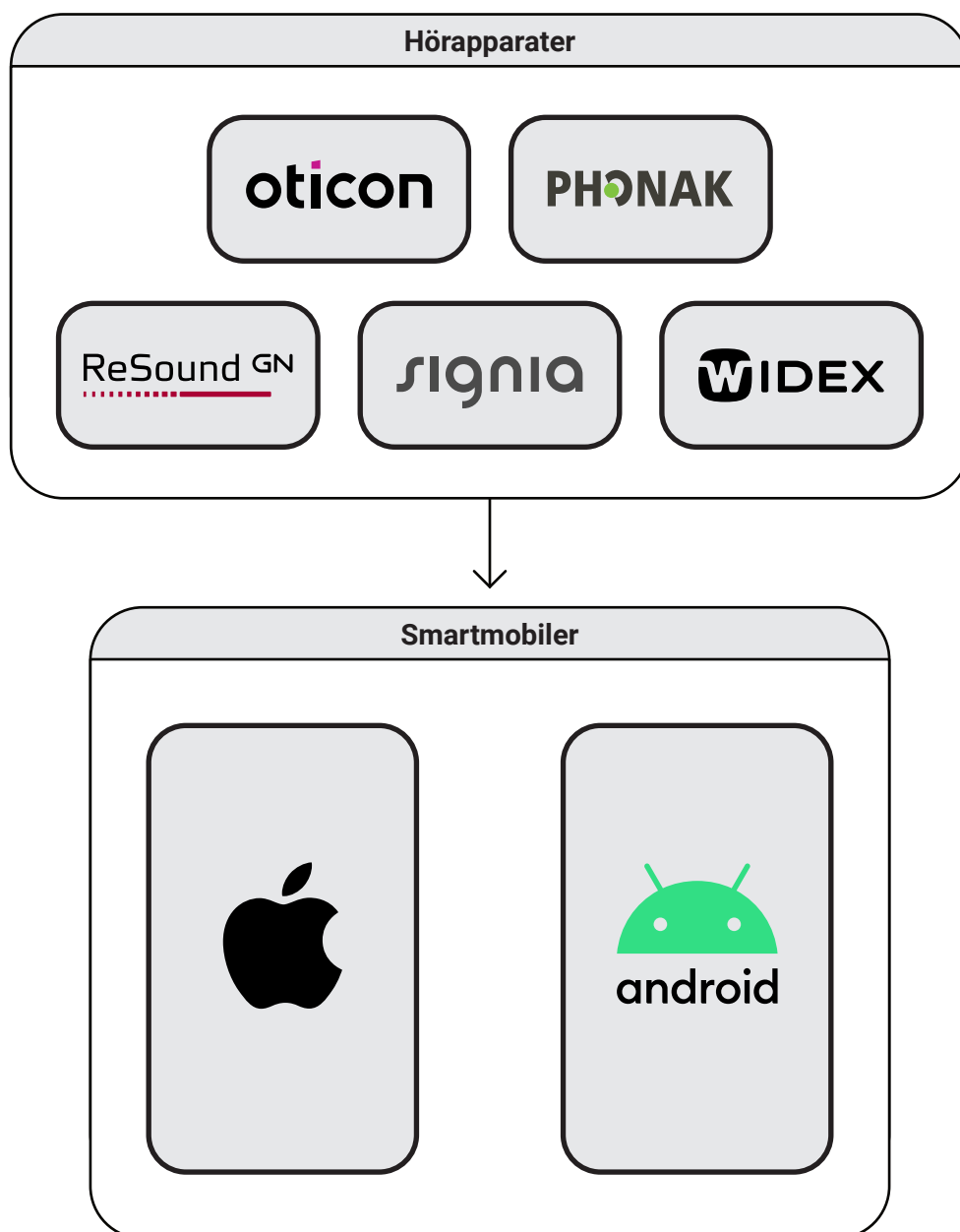

Detta är ett samlande dokument som beskriver parkoppling av hörapparater direkt¹ till smartmobiler².

Avsikten är att ha en tydlig och lättfattlig beskrivning utformad och formulerad på **ett** sätt och i **ett** dokument istället för uppdelad i flera.

Respektive sida kan med fördel skrivas ut separat och ges i pappersform till patient.

De hörapparat-fabrikat som beskrivs i detta dokument är de som i skrivande stund (juni 2024) lämnas ut av Hörselvården i Region Östergötland:

- Oticon
- Phonak
- Resound
- Signia
- Widex

De smartmobiler som beskrivs i detta dokument är:

- Apple Iphone *Från och med **Iphone 5**.*
- Android-mobiler *Samsung, Doro, Huawei etc. - från och med **Android OS 10** och med stöd för **ASHA** (Audio Streaming for Hearing Aids).*

Hörselvården
Öron-, näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland

-
1. Med **direkt** menas här en koppling mellan hörapparater och smartmobil, **utan** extra telefonhjälpmedel (som Oticon Connectclip, Signia Streamline Mic och motsvarande "halsband" eller "myggor").
 2. Observera att utbudet av hörapparater, smartmobiler och deras kompatibilitet med varandra är föremål för ständig ändring och utveckling. Se respektive tillverkares dokumentation för mer information.

oticon

ReSound GN

signia

WIDEX



Parkoppla hörapparater direkt till en Apple Iphone

- Hörapparatmodeller som har stöd för **MFI** (Made for Iphone).
- Iphone-modeller från och med **Iphone 5**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla hörapparaterna med mobiltelefonen enligt nedan:

1. Starta om hörapparaterna.
2. I mobiltelefonen: gå till [Inställningar > Hjälpmedel > Hörsel > Hörapparater](#)
3. Välj dina hörapparater i listan [MFI-hörapparater](#).
4. Välj [Parkoppla](#).

Nu bör hörapparaterna visas tillsammans med [Ansluten](#) i listan [Inställningar > Hjälpmedel > Hörsel > Hörapparater > MFI-hörapparater](#) enligt nedan.

MFI-hörapparater

Hörapparatnamn

Hörapparatfabrikat och modell

[Ansluten >](#)

Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna.



Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

1. Välj hörapparaterna i listan enligt ovan.
2. Välj [Glöm](#) den här enheten + [Glöm](#).
3. Radera appen från mobiltelefonen.
4. Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

1. I mobiltelefonen: Hämta och installera [aktuell app](#)² från appbutiken [App Store](#).
2. Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) (motsvarande) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser, aviseringar och användarvillkor.
3. Välj [Parkoppla enhet](#) (motsvarande).
4. Starta om hörapparaterna.
5. Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll.

Prova! Ändra volym, byt program osv!



1. Musik, talböcker och poddar med mera.
2. Apparna heter (juni 2024):
 - Oticon Companion
 - ReSound Smart 3D
 - Signia App
 - Widex Moment.

Patient:

Hörapparat(er):

Datum:



Parkoppla hörapparater direkt till en Apple Iphone

- Phonak-modellerna **Marvel**, **Paradise**, **Lumity** och modeller med **M**, **P** eller **L** i namnet, till exempel **Bolero M90**, **P90** och **L90**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla **den ena** hörapparaten till mobiltelefonen (det kommer att höras i båda hörapparaterna ändå).

- Starta om hörapparaterna.
- I mobiltelefonen: Gå till [Inställningar > Bluetooth > Andra enheter](#).
- Välj din hörapparat som kommer upp i listan (det kan vara den vänstra eller den högra).
- Följ instruktionerna och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser och användarvillkor.

Nu bör **den ena** hörapparaten visas i listan [Inställningar > Bluetooth > Mina enheter](#) enligt nedan.

Mina enheter

[hörapparat_vä/hö] ²	Ansluten ⓘ

Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna!

Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

- Tryck på ⓘ-symbolen i Bluetooth-listan.
- Välj **Glöm den här enheten** och **Glöm enhet**.
- Radera appen från mobiltelefonen.
- Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

- I mobiltelefonen: Hämta och installera appen [MyPhonak](#) från appbutiken [App Store](#).
- Starta om hörapparaterna.
- Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser, aviseringar och användarvillkor.
- Välj [Parkoppla enhet](#) och klicka vidare tills appen visar [Söker...](#)
- Välj hörapparaterna i listan [Hittade enheter](#) och välj [Parkoppla](#).
- Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Nu bör hörapparaterna (med "LE_" i början) ha lagts till i listan [Inställningar > Bluetooth > Mina enheter](#) enligt nedan.

Mina enheter

[hörapparat_vä/hö] ²	Ansluten ⓘ
LE_[hörapparat_vä] ²	Ansluten ⓘ
LE_[hörapparat_hö] ²	Ansluten ⓘ

Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll!

Prova! Ändra volym, byt program osv!



- Musik, talböcker och poddar med mera.
- Namn på aktuell hörapparat, till exempel "carinas_hörapparat_vänster/höger"

Patient:

Hörapparat(er):

Datum:

oticon

ReSound GN

signia

WIDEX



Parkoppla hörapparater direkt till en Android-mobil

- Hörapparatmodeller med stöd för **ASHA** (Audio Streaming for Hearing Aids),
- Android-mobiler med minst **Android OS 10** och stöd för **ASHA**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla hörapparaterna med mobiltelefonen enligt nedan:

1. Starta om hörapparaterna.
2. I mobiltelefonen: Gå till [Inställningar > Bluetooth](#) (motsvarande).
3. Välj [Sök](#) och sedan dina hörapparater som kommer upp i listan [Tillgängliga enheter](#) (motsvarande).
4. Välj [Sammankoppla](#) (motsvarande) och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) (motsvarande) på frågor om Bluetooth, sammankoppling, notiser och användarvillkor.

Nu bör hörapparaterna visas i listan [Inställningar > Bluetooth > Sammankopplade enheter](#) (motsvarande) enligt nedan.

Sammankopplade enheter (motsvarande)

**Hörapparatnamn**

Ansluten



Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna.



Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

1. Tryck på "kugghjulet" i Bluetooth-listan.
2. Välj [Glöm](#) / [Avbryt sammankoppling](#).
3. Radera appen från mobiltelefonen.
4. Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

1. I mobiltelefonen: Hämta och installera [aktuell app](#)² från appbutiken [Google Play Butik](#).
2. Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) (motsvarande) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser, aviseringar och användarvillkor.
3. Välj [Parkoppla nu](#) (motsvarande) och välj [Ja/Ok/Tillåt](#) (motsvarande) ytterligare ett par gånger.
4. Starta om hörapparaterna.
5. Klicka vidare och till slut på [Sammankoppla](#) (motsvarande).

Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll.

Prova! Ändra volym, byt program osv!



1. Musik, talböcker och poddar med mera.
2. Apparna heter (juni 2024):
 - Oticon Companion
 - ReSound Smart 3D
 - Signia App
 - Widex Moment.

Patient:

Hörapparat(er):

Datum:



Region
Östergötland



Parkoppla hörapparater direkt till en Android-mobil

- Phonak-modellerna **Marvel**, **Paradise**, **Lumity** och modeller med **M**, **P** eller **L** i namnet, till exempel **Bolero M90**, **P90** och **L90**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla **den ena** hörapparaten till mobiltelefonen (det kommer att höras i båda hörapparaterna ändå).

- Starta om hörapparaterna.
- I mobiltelefonen: Gå till [Inställningar > Bluetooth](#) (motsvarande).
- Välj [Sök](#) och sedan din hörapparat som kommer upp i listan [Tillgängliga enheter](#).
- Välj [Sammankoppla](#) och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på frågor om Bluetooth, sammankoppling, notiser och användarvillkor.

Nu bör **den ena** hörapparaten visas i listan [Inställningar > Bluetooth > Sammankopplade enheter](#) (motsvarande) enligt nedan.

Sammankopplade enheter (motsvarande)

[hörapparat_vä/hö]²

Ansluten för samtal och ljud



Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna!



Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

- Tryck på "kugghjulet" i Bluetooth-listan.
- Välj [Glöm](#) / [Avbryt sammankoppling](#).
- Radera appen från mobiltelefonen.
- Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

- I mobiltelefonen: Hämta och installera appen [MyPhonak](#) från appbutiken [Google Play Butik](#).
- Starta om hörapparaterna.
- Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på frågor om Bluetooth och aviseringar mm.
- Välj [Parkoppla enhet](#) och klicka vidare tills appen visar [Söker...](#)
- Välj hörapparaterna i listan [Hittade enheter](#) och välj [Sammankoppla](#) (motsvarande).
- Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Nu bör hörapparaterna (med "LE_" i början) ha lagts till i listan [Inställningar > Bluetooth > Sammankopplade enheter](#) (motsvarande) enligt nedan.

Sammankopplade enheter (motsvarande)

[hörapparat_vä/hö]²

Ansluten för samtal och ljud



LE_[hörapparat_vä]²



LE_[hörapparat_hö]²



Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll.

Prova! Ändra volym, byt program osv!



- Musik, talböcker och poddar med mera.
- Namn på aktuell hörapparat, till exempel "carinas_hörapparat_vänster/höger"

Patient:

Hörapparat(er):

Datum:

Denna sida är avsiktligt tom.



Varsågod, ännu en lathund från
Hörselvården US Linköping!